



PRO-Clean™ | Surface Protein Residue Test

PRO-Clean™ szybko i dokładnie monitoruje czystość powierzchni, aby zapewnić jakość produktów, wykrywając pozostałości białek pozostawione po czyszczeniu. Wystarczy przetrzeć powierzchnię, uwolnić odczynnik, a jeśli obecne są pozostałości białek, odczynnik zmieni kolor na fioletowy. Im więcej zanieczyszczeń, tym szybsza i ciemniejsza zmiana koloru na fioletowy. PRO-Clean szybko weryfikuje higienę powierzchni, umożliwiając natychmiastowe podjęcie działań naprawczych, jeśli to konieczne.

Korzyści:

- Wyniki w ciągu 1-10 minut
- Łatwa do zinterpretowania zmiana koloru – brak potrzeby użycia instrumentów
- Unikalna stabilna chemia w postaci płynnej zapewnia spójne wyniki
- Wstępnie nawilżony wymaz zapewnia niezawodne zbieranie, odzysk i wykrywanie, co gwarantuje spójne wyniki
- Urządzenia o niskim śladzie węglowym są w 100% nadające się do recyklingu
- Okres przydatności 18 miesięcy w temperaturze pokojowej lub chłodniczej (2-25°C)

Czułość:

- Wykrywa 80 µg białka po 1 minucie
- Wykrywa 50 µg białka po 5 minutach
- Wykrywa 20 µg białka po 10 minutach
- Nie brać pod uwagę zmiany koloru po 10 minutach

Wyniki kolorystyczne:



Catalog No.

Description

Quantity

PRO_100


PRO-Clean™ Surface Protein Residue Test

100



Znajdź dokumenty pomocnicze, filmy instruktażowe i więcej na stronie www.hygiene.com

PRO-Clean Procedure

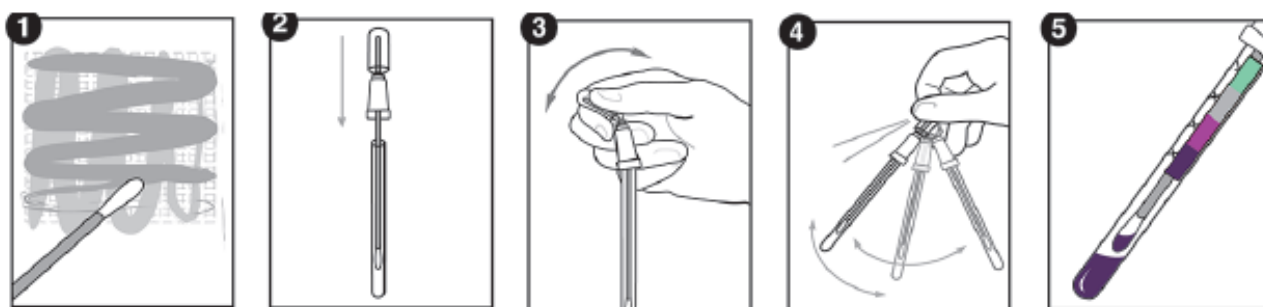

See an instructional demo at [HygienaTV](#) or [HygienaTV](#)



Related Products

EnSURE™ Touch

Powiązane produkty:

EnSURE™ Touch Monitoring System EnSURE Touch to system nowej generacji do monitorowania jakości. Zapewnia szybkie i dokładne weryfikowanie higieny, wspierając program bezpieczeństwa żywności. EnSURE Touch posiada ekran dotykowy 5", technologię synchronizacji bezprzewodowej oraz oprogramowanie w chmurze. EnSURE™ Touch został zaprojektowany do adaptacji do Twojego środowiska pracy, dostarczając dane potrzebne do monitorowania skomplikowanych łańcuchów dostaw, zarządzania audytami i ryzykiem oraz zapobiegania wycofaniom.



AquaSnap™ Testy ATP w wodzie AquaSnap mierzy ATP znajdujący się w próbkach ciekłych, wykorzystując końcówkę w formie "dipper" do pobierania 100 µl próbki cieczy. Urządzenie używa stabilnego w cieczy odczynnika zamiast liofilizowanych enzymów, co zapewnia lepszą powtarzalność i czułość. AquaSnap jest dostępny w formatach Total i Free.



AllerFlow Gluten AllerFlow Gluten to szybki i wygodny test do wykrywania pozostałości glutenu na powierzchniach. AllerFlow Gluten daje wyniki w 10 minut i jest czuły na 5 µg (5 ppm) glutenu.



AllerSnap™ AllerSnap to kolorymetryczny test do prewencji alergenów, umożliwiający szerokie badanie alergenów w ciągu 15-30 minut. AllerSnap wykrywa nawet 3 µg białka.



SpotCheck Plus SpotCheck Plus to kolorymetryczny test higieny, który nie wymaga instrumentów i daje wyniki w ciągu 60 sekund. Wykrywa pozostałości glukozy i laktozy, które są powszechnymi składnikami większości resztek żywności.



Catalog No.	Description	Quantity
ETOUCH	EnSURE™ Touch Monitoring System	1
US2020	UltraSnap™ Surface ATP Swab	100
AQ-100FX	AquaSnap™ Free Water ATP Test	100
AQ-100X	AquaSnap™ Total Water ATP Test	100
ALF-GL	AllerFlow Gluten: Environmental Gluten Surface Residue Test Kit	25
ALS-100	AllerSnap™ High Sensitivity Allergen Prevention Test	100
GL100	SpotCheck Plus: Glucose & Lactose Detection Device	100

MPB-0009 REV B